

朝日ライフサイエンス株式会社 創立 50 周年記念 ハイアールノンフロンデュアル超低温槽キャンペーン

長年のご愛顧ありがとうございます！

2025 年 弊社はおかげさまで、創立 50 周年を迎えました！

キャンペーン期間:2026 年 4 月末日迄



DW-86L578BPST-K 578L

通常価格 2,500,000 円 (税別) のところ

1,750,000 円 (税別)

DW-86L728BPST-K 728L

通常価格 2,900,000 円 (税別) のところ

2,000,000 円 (税別)

DW-86L828BPST-K 828L


通常価格 3,400,000 円 (税別) のところ

2,300,000 円 (税別)

❄️ 二重の安全性と信頼性

デュアル冷却システム採用！

二系統の独立したシステム設計により、各システムは **-80℃** (周囲温度 18~25℃) ※3 の維持が可能となり、保存されたサンプルの安全性を確保します。

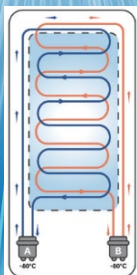

低消費電力モデル

インバーター制御搭載！

最適な周波数で省エネを実現します。



環境にやさしい

自然冷媒 (HC) を使用！

フロン排出抑制法に該当しません。



供給電源 100V/200V 50/60Hz

ユニバーサルパワーサプライ

設置場所が広がる電源仕様。

更に運送搬入費込み！

- 沖縄県・離島を除きます。
- 搬入は平面移動に限り、分解作業を伴う場合や重機等使用の場合は別途御見積となります。



※1 5年保証には、消耗品は含まれません。


※2 弊社技術サービスが日本国内でメンテナンスを行います。

※3 周囲温度 10~18℃、25~32℃の場合は-70℃を維持となります。

◇裏面にオプションのご案内と仕様を掲載しております。

◇ご不明な点は弊社営業までお問い合わせください。

販売者

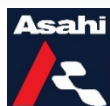

朝日ライフサイエンス株式会社

超低温槽オプション

貯蔵ケース ※1 段にそれぞれ 1 セット収納できます。



CSH400
(DW-86L578BPST-K 型用)



CSH500
(DW-86L728BPST-K 型用)



CSH600
(DW-86L828BPST-K 型用)

CO₂ 補助冷却装置

■メーカー標準品

価格 300,000 円(税別)

■弊社オリジナル品

価格 230,000 円(税別)

温度記録計

価格 180,000 円(税別)



フリーズボックス用貯蔵ラック

DCJ-55-A 5 列×5 段 横から抜き出しタイプ

(81 本立フリーズボックス用)

※フリーズボックスは含まれておりません。



RKH381 4 列×5 段 横から抜き出しタイプ

(100 本立フリーズボックス用)



DCJ-55-B 5 列×5 段 引き出しタイプ

(81 本立フリーズボックス用)

※フリーズボックスは含まれておりません。



貯蔵ラック最大収納数 (1 段あたりの本数×段数)	DCJ-55-A	DCJ-55-B	RKH381
DW-86L578BPST-K	16本 (4本×4段)	16本 (4本×4段)	12本 (3本×4段)
DW-86L728BPST-K	20本 (5本×4段)	20本 (5本×4段)	16本 (4本×4段)
DW-86L828BPST-K	24本 (6本×4段)	24本 (6本×4段)	20本 (5本×4段)

※貯蔵ケース・貯蔵ラックの価格はお問い合わせください。

※高さ 2 インチのフリーズボックスのみに対応しています。

仕様

型式	DW-86L578BPST-K	DW-86L728BPST-K	DW-86L828BPST-K
内容積 (L)	578	728	828
温度設定範囲	-40℃~-86℃ 無負荷時		
温度制御/温度表示	マイクロプロセッサ制御/10.1 インチ LCD タッチスクリーンディスプレイ 温度表示 0.1℃ 単位		
本体重量 (kg)	325	350	380
外寸 W×D×H (mm)	895×998×1980	1046×998×1980	1145×998×1980
内寸 W×D×H (mm)	620×716×1310	766×716×1310	870×716×1310
本体外・内装材/断熱材	カラーコーティング鋼板/真空断熱材 (VIP) +CFC フリー発泡断熱材		
インナードア (枚数/材質)	4 枚/プラスチックフレームポリスチレンボード		
棚板 (枚数/材質)	3 枚/ステンレススチール		
ドアロック	シリンダー錠 (標準)		
キャスター/レベルアジャスター	キャスター本体底部 4ヶ所/レベルアジャスター本体底部前面 2ヶ所		
サービスポート	本体裏面 2ヶ所 (上部および下部に各 1ヶ所)		
冷却システム	2 系統独立冷凍回路自然対流冷却システム		
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒 (HC) 自然冷媒 R600a/R1150		
設置環境条件	室内 (室温 10℃~32℃) および腐食性、火気、爆発物のない環境 湿度 80% 以下の場合: 18℃~25℃ 湿度 57% 以下の場合: 10℃~32℃		
供給電源	単相 100V/200V 50Hz/60Hz 共用 20A *電源は専用ブレーカーおよび単独配線であること		
定格電力 (W) / 定格電流 (A)	1100/10.4	1100/10.4	1400/13
消費電力量 (kW・h/day)	7.0	8.4	10.4
放熱量 (kcal/h)	397	430	464
アラーム機能 (ディスプレイ表示/ブザー)	高温警報/低温警報/周囲温度 35℃ 以上警報/センサー故障警報/ バッテリーロー警報/停電警報/ドア状態警報/フィルター警報		
出力機能	遠隔警報接点 (DC30V2A) /RS485: 温度データ/USB: ユーザーインターフェースデータ		
製造元	Haier Biomedical		

50 年の超低温槽の販売・サービスの実績を持つ弊社が販売・設置・保守・サービスを一貫して行います。



朝日ライフサイエンス株式会社

本社 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地

東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地

TEL (04) 2951-7166 FAX (04) 2951-7170

西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町 3-2-10

TEL (06) 6942-9333 FAX (06) 6943-9300

福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区榎田 2-7-14

サンビュー空港ビル 10 号

TEL (092) 418-1356 FAX (092) 418-1309

技術サービスセンター 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地

TEL (04) 2951-7177 FAX (04) 2951-7179

販売店



バイオリサーチセンター株式会社

本社 〒461-0001 名古屋市東区泉 2-28-24 東和高岳ビル 4F

TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-7-1 瀬木ビル 2F

TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-8-8 花原第 8 ビル 2F

TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132

福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津 1-14-1 FRC ビル 4F

TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315

仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 5-2-10 卸町斎喜ビル 208

TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353

※仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

2025.08.5000