


マウス血圧測定用カテーテル(頸動脈・大腿動脈)

マウス用に設計された観血的血圧測定用カテーテルです(頸動脈・大腿動脈)。

カテーテル本体はポリエチレン(PE50/OD:0.97mm)、先端部はポリプロピレン(26G/OD:0.46mm)でどちらも耐圧素材で構成されているので、正確に圧測定ができます。先端部はテーパ状になっているので、血管に挿入しやすくなっています。ラットの大腿動脈圧測定にも使用できます。

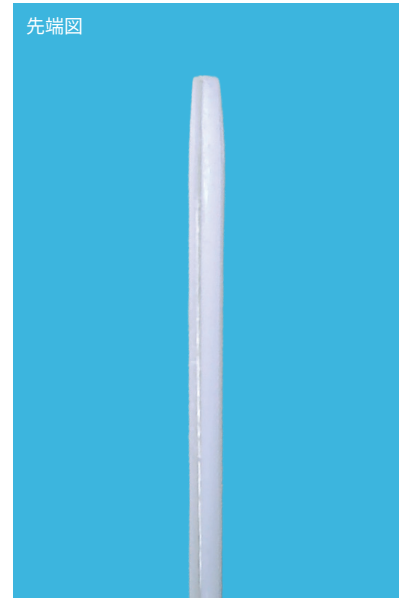

先端図
サイズ:26 G (OD:0.46mm)
素材:ポリプロピレン
先端:テーパ状

26 G (OD:0.46mm)
素材:ポリプロピレン



ディスポ血圧トランスジューサとの接続例

商品コード	型式	品名	価格(円)
69706300	Kii-M	マウス血圧測定用カテーテル 5本入り	30,000



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社 〒461-0001 愛知県名古屋市中区泉2-28-24 東和高岳ビル4F
東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F
福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F
仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208

TEL 052-932-6421 FAX 052-932-6755
TEL 03-3861-7021 FAX 03-3861-7022
TEL 06-6305-2130 FAX 06-6305-2132
TEL 092-626-7211 FAX 092-626-7315
TEL 022-290-9352 FAX 022-290-9353