




## ThermoStar 体温保持装置

動物の手術中及び急性の麻酔下動物実験では、動物の体温を保持することは試験の結果の正確性・再現性を確保するのに非常に重要です。さらに動物の死亡率を減らすことも重要なことです。次世代の4.3インチのカラー液晶タッチ画面を備えた体温保持装置は、軽量、分かりやすい操作性が特長です。リアルタイムに測定温度、設定温度、ヒーティングステータスを表示し、同時に2匹の動物に対し、温度を個別に制御できます。ヒーティングパッドと直腸温プローブの独立した回路を持つことで、システムの安定性と安全性を実現しています。

### 保温パッド 大・中・小

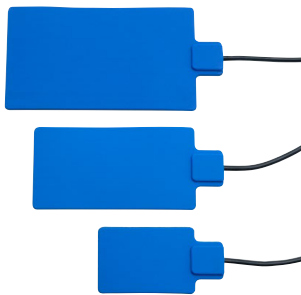

型式	品名	サイズ	ワット数
69023	保温パッド大(ラット用)	12.0 x 20.5cm	20W
69024	保温パッド中(マウス用)	9.0 x 17.0cm	12W
69025	保温パッド小(新生児用)	7.0 x 10.0cm	7W

### 製品仕様

保温レンジ	20~45°C, 0.1°Cの分解能
電源	100~240V, 50/60Hz
コントロールユニット寸法	205 x 148 x 80mm (L x W x H)
コントロールユニット重量	1.3kg
温度プローブ	1.5mm径, 30mm長, ケーブル150cm

### システム

型式	品名	付属品
69020	ThermoStar体温保持装置 (ラット用パッド付)	保温パッド大、温度プローブ
69026	ThermoStar体温保持装置 (マウス用パッド付)	保温パッド中、温度プローブ
69027	ThermoStar体温保持装置 (新生児用パッド付)	保温パッド小、温度プローブ