

超純水精製装置 MicroPure-ST

タンク内蔵 超純水精製装置 特別キャンペーン

期間：2026年4月1日～2026年9月末日

給水ラインと直接接続
できない場所で
使いたい



空きスペースを
有効活用したい



純水はあるが
高純度の超純水も
使用したい



超純水をもっと身近に！

MicroPure UV-ST (6Lタンク付)

通常価格¥1,700,000



キャンペーン価格

¥660,000 (税別)

MicroPure UV/UF-ST (6Lタンク付)

通常価格¥1,750,000



¥690,000 (税別)



@Thermo Fisher Scientific

純水用6Lタンク内蔵

前処理水を入れるためのタンクが本体背面に
内蔵されているため供給水ラインと直接接続せず
使用が可能です。

給水のない研究室・学生実習室等での使用にオススメです。

RO水・イオン交換水・蒸留水をタンクに注ぐだけで
超純水を精製します。

システム内循環機能

システム停止中の細菌増殖を防ぎ、
本体の異常を常時監視し、エラー発生時はメッセージで
お知らせします。

コンパクトで省スペース

外寸W305×D400×H545mmのコンパクトサイズです。

Aquastopクイックコネクト設計

カートリッジ接続部はワンタッチ式で工具が要らず
簡単に交換が可能です。

2種のラインナップ

UV/UFタイプのウルトラフィルターは自動的に洗浄され、
最適な状態を保持し効果的にエンドトキシンとヌクレアーゼ
を除去します。



朝日ライフサイエンス株式会社

※表示価格には消費税及び運送搬入費、据付費等含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更する場合があります。

MicroPure-ST 仕様

モデル	MicroPure UV -ST	MicroPure UV/UF -ST
型式	50132374	50132372
用途	無機および有機トレース分析	分子生物学PCR・DNA・細胞培地など
採水流量(最大値)	1.0L/min	0.8L/min
精製量	15L/Day	
高さ(mm)	545	
幅(mm)	305	
奥行(mm)	400	
重量(kg)	17	
電源(消費電力)	AC 100 V 50/60 Hz(0.06KW)	
モニタリング機能	比抵抗値(または導電率)/超純水温度	
有機物と塩素の除去	イオン交換カートリッジ	
バクテリアと微粒子の除去	0.2 μ m最終フィルター	
パイロジェンとヌクレアーゼの除去	n/a	ウルトラフィルター
微生物の不活性化、有機化合物の酸化	185/254nm UVランプ	
供給水	飲用水道水(逆浸透、イオン交換または蒸留で前処理済であること)	

【オプション】MicroPure シリーズ


商品名	価格
ドレインパン	お問い合わせください



ドレインパン(受け皿)

【消耗品】MicroPure シリーズ

商品名	品番
185/254nmUVランプ	09.1002
イオン交換カートリッジ	09.1006
0.2 μ m最終フィルター	09.1003
エアVENTフィルター	22.0091
ウルトラフィルター	50133981 ※UF(ウルトラフィルター)搭載モデル

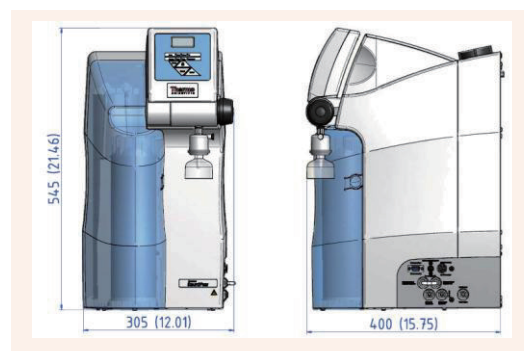

ご相談、お見積などお気軽にお問い合わせください



バイオリサーチセンター株式会社

www.brck.co.jp sales@brck.co.jp

本社	〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉2-28-24 東和高岳ビル4F	TEL 052-932-6421	FAX 052-932-6755
東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-7-1 瀬木ビル2F	TEL 03-3861-7021	FAX 03-3861-7022
大阪営業所	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル2F	TEL 06-6305-2130	FAX 06-6305-2132
福岡営業所	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル4F	TEL 092-626-7211	FAX 092-626-7315
仙台営業所	〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル 208	TEL 022-290-9352	FAX 022-290-9353

※表示価格には消費税及び運送搬入費、据付費等含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更する場合があります。